



DR181 Holter için Bağlama Kılavuzu

Holter için 7 Elektrot Yerleştirme

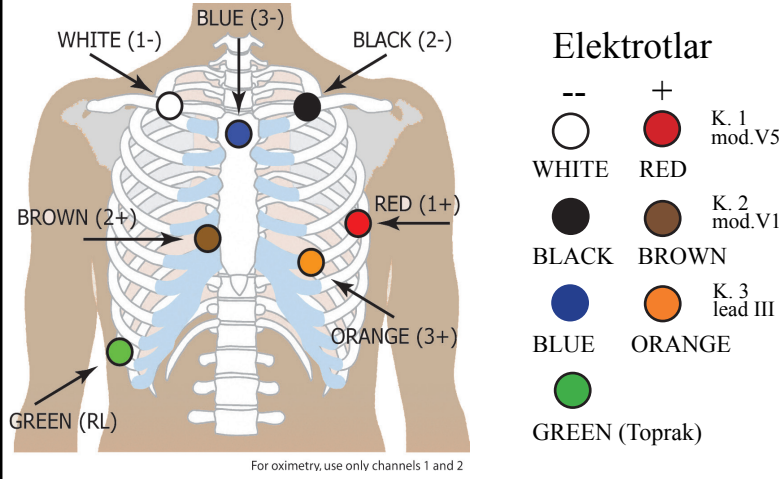


Holter için 5 Elektrot Yerleştirme

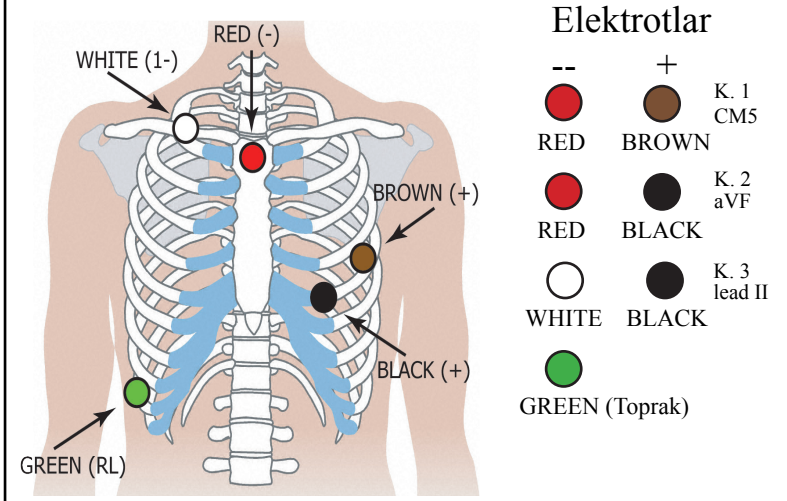


Hastayı Hazırlama

- Kas bölgeleri ve meme dokusundan kaçınarak kemik üzerinde bir bölge seçin.
- Elektrot bölgelerini alkolle kuvvetle temizleyin ve kılları almak için jilet kullanın.
- Elektrot bölgelerinde bir silme pedi veya gazlı bez ile abrazyon yapın. Elektrotları uygulamadan önce bölgelerin kurumasını bekleyin.
- Elektrotları elektrot tellerine sıkıca tıklararak yerleştirin.
- Elektrotları uygun bölgelere uygulayın. Tutarlı yapışma için yapışkan kenarı sıkıca bastırın.
- Gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için elektrot kablolarında halka yapın ve yerine bantlayın.

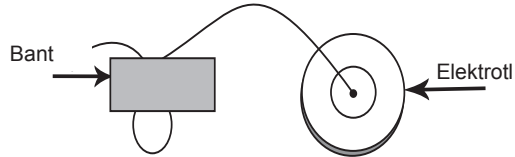

12 lead Holter için 10 Elektrot Yerleştirme

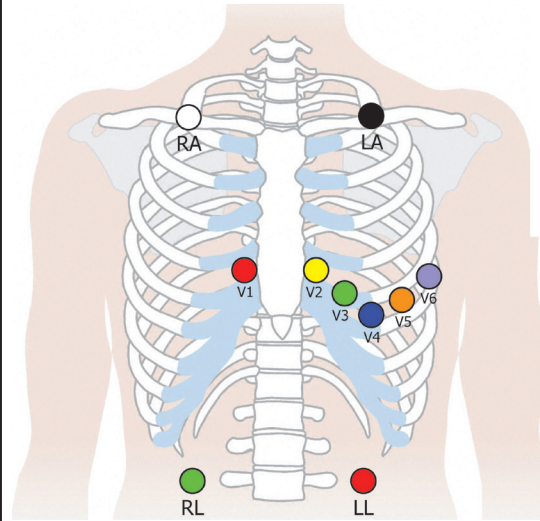


- RA sağ orta klaviküler
LA sol orta klaviküler
RL sağ kresta iliaka
LL sol kresta iliaka
V1 4. interkostal aralık, sternumun sağ
V2 4. interkostal aralık, sternumun solu
V3 V2 ile V4 arası
V4 5. interkostal aralık, orta klaviküler hat
V5 5. interkostal aralık, anterior aksiller hat
V6 5. interkostal aralık, orta aksiller hat

Prekordiyal Elektrotlar



Holter Elektrotlar

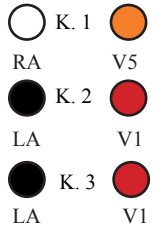

NorthEast Monitoring, Inc.

141 Parker Street, Suite 111
Maynard, MA 01754 USA
www.nemon.com

phone: [+1] 978-461-3992
fax: [+1] 978-461-5991
toll free USA: 866-346-5837
email: info@nemon.com



NEMM033 - Rev-C - Türkçe - ocak 2016

DR181 Holter Hızlı Başlama Kılavuzu

KAYDI BAŞLATMAK İÇİN:

1. Kabloyu kayıt cihazına takın ve sonra hastayı arkada gösterildiği şekilde bağlayın.
2. Kayıt cihazına formatlanmış bir SD kartı ve 2 AA pil takın. İstenirse SD kartı belleğini silin. Ekran tarih, zaman, pil gücü, "DR181", yazılım versiyonu ve "NorthEast Monitoring" i gösterir. Ana menüye devam etmek için Sonraki kısmına basın.
3. İsterseniz ayarları klavyedeki düğmeye basarak ayarlayın. Ayarlar kısmındaki ek ayar seçeneklerini görmek için Başka kısmına basın.
4. Ayarlar doğru olduğunda Önceki düğmesine basarak tekrar ana menüye gidin.
5. Hasta kimliğini girmek veya doğrulamak için Yeni Hasta ekranına basın. Hasta Kimliği için en az bir karakter girilmelidir. Hasta Kimliği girilmesi bittikten sonra Next Sonraki kısmına basın.
6. Şimdi 3 kanal için elektrot kalitesini göreceksiniz. Elektrot kalitesi veya empedans en iyi sonuçlar açısından 4 veya 5 olmalıdır. Gerekirse elektrotları ayarlayın.
7. Kaydetmeye başlamak için Kaydet kısmına basın. 12 Elektrot için dört elektrot kalitesi ekranının hepsini görmek için Sonraki kısmına basın.

KAYITTAN SONRA:

Kayıttan sonra kartı çıkarmak için serbest bırakmak üzere yavaşça içeri itin. Kartı asla yuvadan dışarı çekmeyin çünkü kayıt cihazına zarar verebilir.

NOT: Yeni bir hasta kaydetmek isterseniz ve sonuncudan beri yarım saatten az bir süre geçmişse kayıt cihazı kayda devam etmeye çalışabilir. 5 saniyelik geri sayımı 5 sol taraf düğmesine üstten başlayarak basarak kesebilirsiniz. SD Kartını silerseniz artık yeni bir hasta kaydedebilirsiniz.

MESAJLAR:

ZAYIF Pil veya FAILURE ARIZA– Kayıt cihazını başlatmadan önce her iki pilideğiştirin.

SD Kartını Sil? EVET/HAYIR - SD kartı önceki bir hasta için kullanılmışsa, şimdi silmeniz gereklidir. Eğer kart üzerinde kaybetmek istemediğiniz EKG verileri olması nedeniyle silinmeyecekse çıkarıp formatlanmış başka bir SD kartı takmanız gerekecektir.

SD kart dolu - Bellek dolu olduğundan kayıt durmuştur.

SD Card errors SD Kartı hataları - SD Kartları HE/ LX Analysis yazılımınız kullanılarak formatlanmalıdır. Ayrıca, SD kartında kayıt yapması için bir flash.dat dosyası bulunmalıdır. SD Kartı hatalarının ayrıntıları ve kartınızın formatlanmasının ayrıntıları için HE/LX Analysis Kullanıcı başvurun.



MediMark Eruope, SARL
11 rue Emile Zola
BP 2332
F-38033 Grenoble CEDEX 2
France



SETTINGS:

Zaman ve Tarih - Tarih ve Zaman arasında ekranın sağ alt kısmında geçiş yapın

Dil - Çok sayıda dil arasında seçim yapın

Ekran - Normal ve Inverted Ters ekranlar arasında seçim yapın

Kilit Ayarları - Kayıt cihazındaki tüm ayarları kilitler

Kontrast - LCD ekranı kontrastını ayarlar

Genel Ayarlar

Çözünürlük - Yüksek ve Normal çözünürlük arasında seçim yapın.

Günlükleri İşaretle - EKG'de günlük girdilerini bir 6 döngülü kare dalga ile belirtip belirtmeme arasında seçim yapın

Kayıt Tipi - 3 kanal ve Oksimetri arasında seçim yapın. 12 Elektrotlu isteğe bağlıdır.

12 Elektrot Ayarları

Aralık - Bir aralığın ne sıklıkla kaydedildiği. Rakam kaydetme arasındaki saniyeleri belirtir

Uzunluk - Kaydedilen 12 Elektrot stripi uzunluğu

Örnek Hızı - Saniyede 720 ile 1440 örnek arasında seçim yapın